

COVID-19 Virus (SARS-CoV-2) N Proteïne Detectie Kit

CE
IVD
ISO13485




Antigeen Sneltest Kit



Verpakking
100 testen/doos



Specimen Type
Nasofaryngeaal uitstrijkje

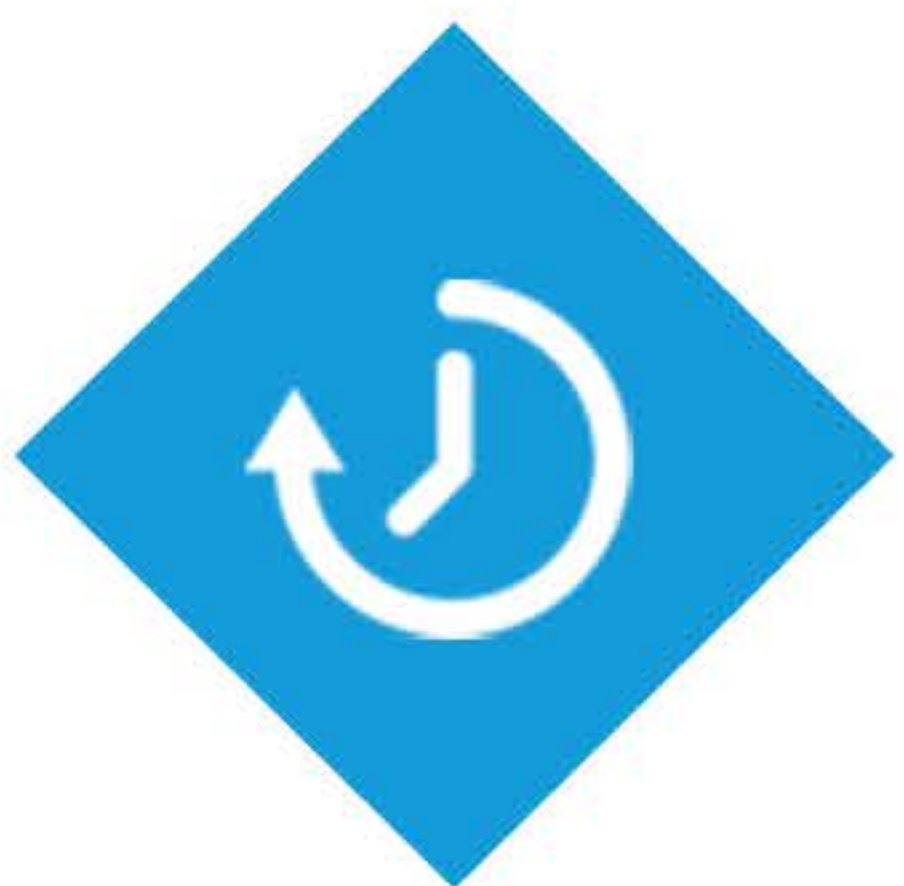

Detectie Tijd
15 minuten

Simpel | Snel | Kostenefficiënt
Nauwkeurig | Makkelijk in gebruik




LÆGEMIDDELSTYRELSEN
DANISH MEDICINES AGENCY

Global Care Company BV
Gooimeer 1, 1411 DC Naarden NL

Telefoon: +31 35 5885 774
Email: sales@globalcare.company
Website: www.globalcare.company



COVID-19 Virus (SARS-CoV-2) Antigeen Detectie Kit

CE

IVD

ISO13485



Nauwkeurigheds percentage



Product Informatie

Het product wordt gebruikt voor detectie van SARS-CoV-2 N-proteïne in luchtwegmonsters.

- ✓ Gebruikersvriendelijk
- ✓ Snel testresultaat (15 minuten)
- ✓ Geen dure apparatuur nodig
- ✓ Aantal tests - eenvoudig schaalbaar
- ✓ Directe veldscreening



Voordelen

Wij zijn van mening dat regelmatig testen de sleutel is om COVID-19 onder controle houden.



Zorg voor de veiligheid en gezondheid van uw medewerkers



Houd uw bedrijf en productie draaiende



Geef uw klanten / bezoekers gemoedsrust in moeilijke tijden



Handel verantwoordelijk en wees een voorbeeld om te volgen

Global Care Company BV
Gooimeer 1, 1411 DC Naarden NL

Telefoon: +31 35 5885 774
Email: sales@globalcare.company
Website: www.globalcare.company

Covid-testmethodes op de markt


| | RT-PCR (RNADetection) | Antigeen Detectie* | Antilichaam Detectie |
|---------------------|---|-----------------------------------|----------------------|
| Test Tijdsduur | >2 uur | 15 Minuten | 15 Minuten |
| Specificiteit | 100% Specificiteit | 99,56% Specificiteit | 99% Specificiteit |
| Gevoeligheid | 100% Gevoeligheid | 93,75% Gevoeligheid | 87% Gevoeligheid |
| Automatisering | Medium | n.v.t. | n.v.t. |
| Operationeel niveau | Moeilijk, Complex | Gemakkelijk | Gemakkelijk |
| Detectie punt | Vroeg | Vroeg | Laat |
| Monster | Nasofaryngeaal uitstrijkje Orofaryngeaal uitstrijkje | Nasofaryngeaal uitstrijkje | Serum |

* Onze test

Gebruiksaanwijzing

- 

Verdeel alle buffer in de extractiebuis.

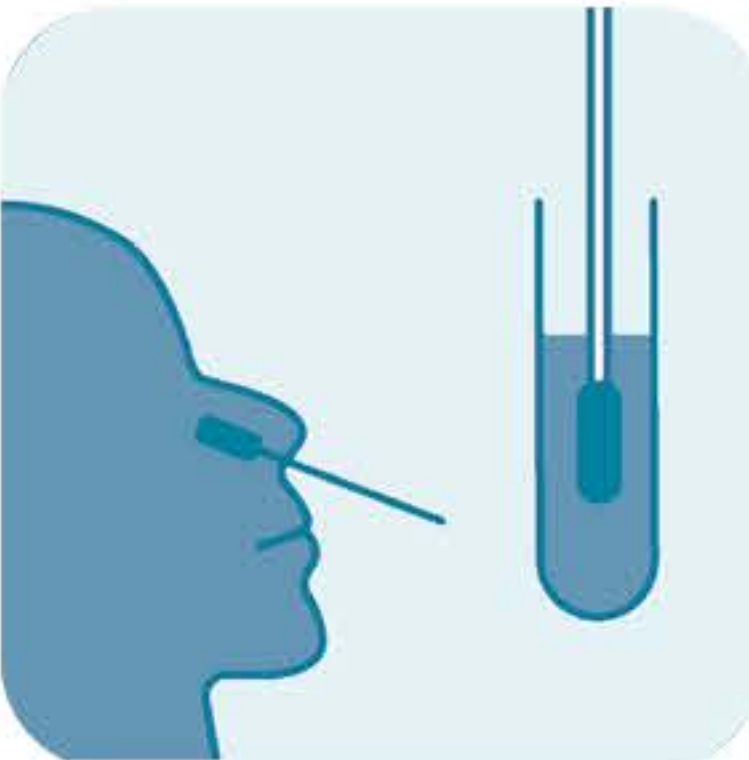 - Neem een bufferampul.
 - Draai de bovenkant eraf en giet alle buffer in een extractiebuisje
- 

Maak een neusuitstrijkje.

 - Steek de steriele swab in het neusgat van de persoon, ongeveer 2 cm vanaf de neusgatrand. Doe dit in beide neusgaten.
- 

Steek de steriele swab in de extractiebuis.

 - Steek de steriele swab in de extractiebuis.
 - Druk de onderkant van de buis samen rond de kop van de steriele swab. Draai de steriele swab meerdere keren en beweeg het 5 keer op en neer in de oplossing.
- 

Voeg 3 druppels toe aan de detectiekaart.

 - Knijp voorzichtig 3 druppels vloeistofmonster uit in de monsterplaats van de detectiekaart.
- 

Interpretatie

 - Interpretatie van het resultaat. Een streep betekent negatief. Twee strepen betekenen positief. Maximaal 15 minuten wachten.